

Paulina - Kompressionsbody

ART.NO 51105

Paulina er en kompressionsbody med fuld længde ben. Giver ekstra støtte over mave, ryg, lår, knæ og læg. Bodyen er åben i skridtet, og benlængden kan forkortes. Der er lynlås i begge sider, som gør det nemt at tage bodyen af og på.

Indikationer: Paulina body anbefales efter maveplastik og/eller fedtsugning på mave, ryg, bagdel, lår, knæ og læg eller i forbindelse med lårplastik. NordiCares kompressionstøj anvendes efter plastikkirurgiske indgreb for at opnå det bedst mulige behandlingsresultat. Kompression forbedrer blodomløbet og reducerer risikoen for hævelse efter operationen, giver bedre opheling og endda smertelindring.

Materiale: 85 % polyamid, 15 % elastan. Latexfri.

Vaskeråd: Maskinvask ved 40 °C – kan om nødvendigt vaskes ved højere temperaturer, op til 60 °C. Produktet holder længere, når det vaskes ved lavere temperaturer. Skal tørres fladt, ikke tørretumbles. Lynlåsen skal lynes op før vask. Hvis der opstod blodpletter, skal det lægges i blød eller vaskes i koldt vand. Brug ikke blegemiddel, klor eller skyllemiddel, da dette kan forringe materialets funktionalitet.

Måltagning: Tøjet skal sidde stramt uden at være ubekvemt. Et stykke tid efter operationen, hvor en eventuel hævelse er forsvundet, kan der vælges en mindre størrelse.

OBS! Kompressionstøj er designet til at sidde stramt. Optimal kompression og støtte kræver nøjagtig måltagning.

Talje: Mål omkredsen, hvor taljen er smallest.


Hofte: Stå med begge fødder samlet, og mål omkredsen på det bredeste punkt.

Benlængde: Længden kan justeres ved at afklippe stoffet under sømmene.

Størrelse	Taljemål cm	Hoffemål cm	Art.no sort
Small	60-66	85-92	51105-00-40
Medium	67-74	93-100	51105-00-50
Large	75-82	101-108	51105-00-60
X Large	83-89	109-114	51105-00-70
2X Large	90-100	115-122	51105-00-80



*Produktet fås i sort, er vist i hvid til klarheden af illustrationen.

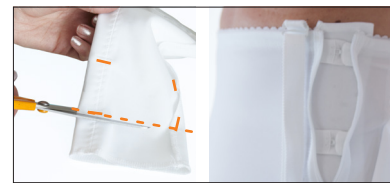

Benlængde kan forkortes i tre forskellige længder ved klippe af under den markerede søm.

Compression
STRONG

STRONG is the indication of the strongest level of compression for our products. By choosing a smaller or larger size of the garment, the level of compression can be adjusted.

