

Patsy - Kompressionsbukser

ART.NO 51201

Lange kompressionsbukser i strikket sømløst materiale. Anbefales efter operation på ben eller mave såsom fedtsugning og/eller kirurgi. Hægte og krog lukning i begge sider for nem på og aftagning og justering af pasform. Åbnet skridt muliggør toiletbesøg uden at fjerne beklædningen. Linning med silikonekant for at bukserne sidder bekvemt på plads. Bred kile på indersiden af låret for den bedste komfort og funktion. Formstrikket, fleksibelt materiale i 4-vejs stretch, der former sig efter kroppen. Aflaster og komprimerer uden at stramme eller føles ubehageligt. Formstrikkede zoner i knæ, balder og lyskeparti samt forstærkning over bug.

Indikationer: Anbefales efter plastikkirurgi. Ved kompression forbedres kredsløbet, risikoen for hævelse efter operation mindskes, der opnås bedre opheling og ligeledes smertelindring. Tilsvarende kompressionsklasse 1.

Kontraindikationer: Infektion. Arterielle kredsløbsforstyrrelser. Høj risiko for trombose.

Materiale: 87% Polyamid, 13% Elastan. Latex-fri.

Vaskeråd: Maskinvask ved 40°C, kan om nødvendigt vaskes ved højere temperaturer, op til 60°C. Produktet holder længere, når det vaskes ved lavere temperaturer. Brug vaskepose. Brug ikke blegemiddel, klor eller skyllemiddel. Må ikke tørretumbles.

Måltagning: For bedste pasform og korrekt kompressionsgrad er det vigtigt, at beklædningen vælges omhyggeligt i henhold til måltabellen. Beklædningen skal sidde tæt, men må ikke føles ubehageligt eller stramme.


Talje: Mål omkredsen, hvor taljen er smallest.

Hoffer: Stå med fødderne samlet og mål omkredsen over pubis, hvor hofte/bækken er bredest.

Lår: Omkredsmåling midt på låret.



Hægte og krog lukning på begge sider samt silikone i linningen.

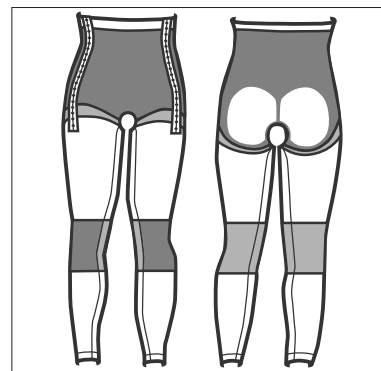

Adjustable with hook & eye



Seamless



4-way stretch



Compression class I



Størrelse	Taljemått cm	Hoffemått cm	Lårmått cm	Art.no Sort	Art.no Beige
XS	62-68	86-91	46-50	51201-00-30	51201-08-30
S	69-75	92-97	50-54	51201-00-40	51201-08-40
M	76-83	98-103	54-58	51201-00-50	51201-08-50
L	84-92	104-111	58-62	51201-00-60	51201-08-60
XL	93-101	112-119	62-66	51201-00-70	51201-08-70
2XL	102-110	120-127	66-70	51201-00-80	51201-08-80