

Daisy - Kompressionsbody

ART.NO 51204

Kompressionsbody i strikket sømløs materiale, dobbelt materiale over bugen. Anbefales efter indgreb på maven, såsom fedtsugning eller abdominal kirurgi. Bodyén kan åbnes helt og let tages på umiddelbart efter operation. Hægte og krog lukning i begge sider for nem på og aftagning og justering af pasform. Skridtet kan åbnes med hægte og krog lukning, hvilket muliggør toiletbesøg uden at fjerne beklæningen. Linning med silikonekant for at bodyén sidder komfortabelt på plads. Det dobbelte materiale over maven danner en lomme, hvor eventuelt indlæg/skum materiale kan indsættes for at give ekstra tryk. Formstrikket, fleksibelt materiale i 4-vejs stretch, der former sig efter kroppen. Aflaster og komprimerer uden at stramme eller føles ubehageligt. Formstrikkede zoner ved balder og rygpart.

Indikationer: Kompressionstøj efter plastikkirurgi. Tilsvarende kompressionsklasse 1.

Kontraindikationer: Infektion. Arterielle kredsløbsforstyrrelser. Høj risiko for trombose.

Materiale: 87% Polyamid, 13% Elastan. Latex-fri.

Vaskeråd: Maskinvask ved 40°C, kan om nødvendigt vaskes ved højere temperaturer, op til 60°C. Produktet holder længere, når det vaskes ved lavere temperaturer. Brug vaskepose. Brug ikke blegemiddel, klor eller skyllemiddel. Må ikke tørretumbles.

Måltagning: For bedste pasform og korrekt kompressionsgrad er det vigtigt, at beklædningen vælges omhyggeligt i henhold til måltabellen. Beklædningen skal sidde tæt, men må ikke føles ubehagelig eller stramme.


Talje: Mål omkredsen, hvor taljen er smaldest.

Hoffer: Stå med fødderne samlet og mål omkredsen over pubis, hvor hofte/bækken er bredest.

Størrelse	Talje cm	Hofte cm	Art.no Sort	Art.no Beige
XS	62-68	86-91	51204-00-30	51204-08-30
S	69-75	92-97	51204-00-40	51204-08-40
M	76-83	98-103	51204-00-50	51204-08-50
L	84-92	104-111	51204-00-60	51204-08-60
XL	93-101	112-119	51204-00-70	51204-08-70
2XL	102-110	120-127	51204-00-80	51204-08-80



Hægte og krog lukning i begge sider samt i skridtet. Silikone kant i taljen.

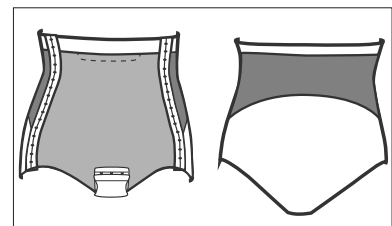

Seamless



4-way stretch



Compression class I



Fully openable & Adjustable



STANDARD 100

6234-7001 DTI

www.oeko-tex.com

