

Cindy - Kompressionsbody

ART.NO 51208

Kompressionsbody med ekstra høj talje i strikket sømløst materiale. Anbefales efter indgreb på mave, sider, ryg, balder og lår, såsom fedtsugning og/eller kirurgi. Bodyen har hægte og krog lukning i begge sider for nem af- og påtagning og justering af pasform. Bred flap på indersiden af låret ret for bedste komfort og funktion. Bodyen har en skjult åbning i skridtet, der tillader besøg på toilettet uden at tøjet fjernes. Åbningen er designet til at give god kompression i området. Aftagelige og justerbar skulderstropper. Formstrikket, fleksibelt materiale i 4-vejs stretch, der former sig efter kroppen. Aflaster og komprimerer uden at stramme eller føles ubehageligt. Formstrikkede zoner ved balder-, ryg- og lyskeparti samt forstærket strikning over bugen

Indikationer: Anbefales efter plastikkirurgi. Ved kompression forbedres kredsløbet, risikoen for hævelse efter operation mindskes, der opnås bedre opheling og ligeledes smertelindring. Tilsvarende kompressionsklasse 1.

Kontraindikationer: Infektion. Arterielle kredsløbsforstyrrelser. Høj risiko for trombose.

Materiale: 87% Polyamid, 13% Elastan. Latex-fri.

Vaskeråd: Maskinvaskes ved 40°C, kan ved behov vaskes ved højere temperaturer, dog maks. 60°C. Produktet holder længere, hvis det vaskes ved lavere temperaturer. Brug vaskepose. Må ikke tørretumbles. Brug ikke blegemiddel, klorin eller skyllemiddel, da det kan forringe materialet.

Måltagning: For bedste pasform og korrekt kompressionsgrad er det vigtigt, at beklædningen vælges omhyggeligt i henhold til måltabellen. Beklædningen skal sidde tæt, men må ikke føles ubehagelig eller stramme.

Talje: Mål omkredsen, hvor taljen er smaldest.


Hoffer: Stå med fødderne samlet og mål omkredsen over pubis, hvor hofte/bækken er bredest.

Lår: Omkredsmåling midt på låret.


Størrelse	Talje cm	Hoffer cm	Lår cm	Art.no Beige	Art.no Sort
XS	62-68	86-91	46-50	51208-08-30	51208-00-30
S	69-75	92-97	50-54	51208-08-40	51208-00-40
M	76-83	98-103	54-58	51208-08-50	51208-00-50
L	84-92	104-111	58-62	51208-08-60	51208-00-60
XL	93-101	112-119	62-66	51208-08-70	51208-00-70
2XL	102-110	120-127	66-70	51208-08-80	51208-00-80



Hægte og krog lukning i begge sider og aftagelige skulderstropper.

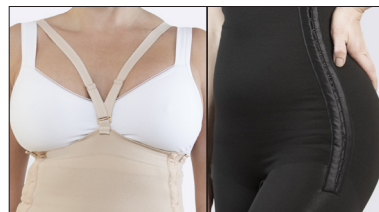

Skulderstropperne kan fastgøres foran eller i siderne.

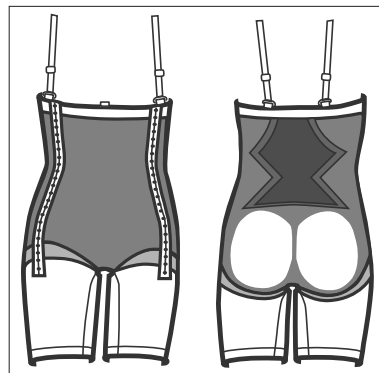

Adjustable with hook & eye



Seamless



4-way stretch



Compression class I



STANDARD 100
6234-7001
DTI
www.oeko-tex.com

