

# BirkPlus MP 45 - 3-punkts korset

ART.NO 50371

3-punkts korset som anvendes for at begrænse/kontrollere fleksion og sidelæns bevægelse i den thoracolumbale del af rygsøjlen.

Ortosen er nem at justere til bedste pasform:

- Den nedre bøjle kan indstilles løst eller fikseret. Ved løs indstilling opnår man en mere bekvem ortose.
- Den øverste bøjle kan justeres i bredden samt i forskellige vinkler for at opnå den bedste pasform over brystet ved forskellige grader af lordose.
- Ortosen kan justeres i højden. Separat polstring i begge sider kan positioneres forskelligt.

Efter tilpasning af ortosen, kan den tages af og på med et spænde. Når spændet er låst, er det af sikkerhedsmæssige grunde udstyret med en fjeder. BirkPlus er let at tage brusebad med, polstringen absorberer ikke vand.


**Indikationer:** Fraktur, hvirvelkompression, osteoporose, dislokation, artrose.

**Materiale:** Anodiseret aluminium. Polstring af PE-skum, syntetisk hvid læder. Polyesterbånd. Latexfri.

**Vaskeråd:** Aftørres med en fugtig, blød klud.

**Måltagning:** Hoftemål i cm.

Størrelse	Hoftemål cm	Højde	Art.no
Small	60-75	30-37	50371-09-40
Medium short	75-90	34-42	50371-59-50
Medium	75-90	36-46	50371-09-50
Medium long	75-90	40-52	50371-69-50
Large short	90-105	36-46	50371-59-60
Large	90-105	40-52	50371-09-60
XLarge short	105-115	39-49	50371-59-70
XLarge	105-115	42-54	50371-09-70

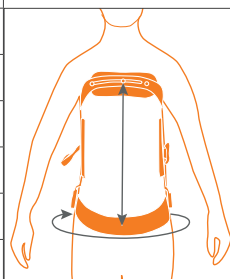

MD Class I CE

