



NeoROM 40 cm

art no 70526


STABILIZING KNEE BRACE

Measurement

1. Circumference thighs in cm (about 15 cm above mid-patella).
2. Circumference knee mid-patella.
3. Circumference calf in cm (about 15 cm below mid-patella).

Extension and flexion can be adjusted and locked at 0°, 15°, 30°, 60° and 90°, or free movement in flexion.

Size	1. 15cm above mid-patella	2. mid-patella	3. 15cm below mid-patella
Small	40,5-46	30,5-35,5	28-33
Medium	46-48,5	35,5-40,5	33-38
Large	48,5-53,5	40,5-46	38-43
X-Large	53,5-58,5	46-51	43-48,5
2X-Large	58,5-63,5	51-56	48,5-53,5
3X-Large	63,5-68,5	56-61	53,5-56
4X-Large	68,5-71	61-66	56-58,5

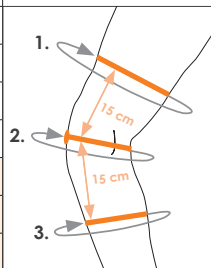

King-size



NeoROM 40 cm

art no 70526


STABILIZING KNEE BRACE

Measurement

1. Circumference thighs in cm (about 15 cm above mid-patella).
2. Circumference knee mid-patella.
3. Circumference calf in cm (about 15 cm below mid-patella).

Extension and flexion can be adjusted and locked at 0°, 15°, 30°, 60° and 90°, or free movement in flexion.

Size	1. 15cm above mid-patella	2. mid-patella	3. 15cm below mid-patella
Small	40,5-46	30,5-35,5	28-33
Medium	46-48,5	35,5-40,5	33-38
Large	48,5-53,5	40,5-46	38-43
X-Large	53,5-58,5	46-51	43-48,5
2X-Large	58,5-63,5	51-56	48,5-53,5
3X-Large	63,5-68,5	56-61	53,5-56
4X-Large	68,5-71	61-66	56-58,5

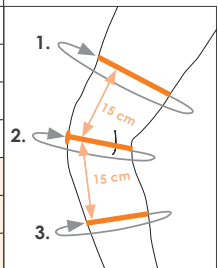

King-size

INSTRUCTIONS FOR USE

NeoROM 40 cm – STABILIZING KNEE BRACE

art no 70526

Application

- SE** 1. Öppna upp ortosen.
2. Placera ortosen med den grå insidan mot benet och centrera ortosen led strax ovan knäleden.
3. Förslut banden, starta med bandet under knät, se till att ortosen sitter stadigt utan att hindra cirkulationen. Förslut de övre banden.
OBS! För att ställa in ROM, ta ut skenorna ur fickorna, öppna locket och ställ önskad inställning med stiften. Säkerställ att båda lederna har samma inställning.

- DK** 1. Åbn ortosen.
2. Placer ortosen med det grå inde mod benet og centrér skinnerne lige over knæleddet.
3. Luk stropperne, start med stroppen under knæet, sørg for, at ortosen er fast placeret uden at forhindre cirkulation. Luk de øvre bånd.

OBS! For at indstille ROM, fjern skinnerne fra lommerne, åbne omslag og indstille den ønskede indstilling med stifterne. Sørg for at begge samlinger har samme indstilling.

- NO** 1. Åpne ortosen.
2. Sett ortosen med grått innvendig mot benet og sentrer skinnene rett over kneleddet.
3. Lukk stroppene, start med stroppen under kneet, sørg for at ortosen er stødt fast uten å hindre sirkulasjon. Lukk øvre banden.

Indication

- SE** Stabilisering av knäled, posttraumatiskt och postoperativ. Begränsning av hyperextension.
DK Stabilisering af knæled, posttraume og postoperation. Begrænsning af hyperextension.
NO Stabilisering av kneledd, posttraumatisk og postoperativ. Begrensning av hyperekstension.

Washing instructions

- SE** Handtvätt max 30°. Plantorkas. Fäst kardborrbanden och ta ut skenorna vid tvätt. Använd ej blekmedel, klorin eller sköljmedel då detta kan försämra materialets funktion. Ej kemtvätt. Stryk och torktumla ej.
DK Håndvask max 30°. Tørres plant. Fastgør burre båndet og fjern skinnerne inden vask. Brug ikke blegemiddel, klorin eller skyllemiddel, da det kan forringe materialet. Ikke rens. Må ikke stryges eller tørretumbles.
NO Håndvask maks 30°. Tørkes flatt. Fest borrelåsen og ta ut skinnene når du vasker. Ikke bruk blekemiddel, klorin eller tøyrenskemiddel siden dette kan svekke materialets funksjon. Ikke kjemisk rens/ tekstilrens. Skal ikke strykes eller kjøres i tørketrommel.

Material Composition

Latex-Free Neoprene, Polyester, Aluminum, Nylon.

MERK! For å sette ROM, fjern skinnene fra lommene, åpne locket og sett ønsket innstilling med pinnene. Pass på at begge leddene har samme innstilling.

- FI** 1. Avaa ortoosi.
2. Aseta ortoosi jalkaa vasten ja keskiätä kiskot polvinivelen yläpuolelle.
3. Sulje hihnat, aloita hihna polven alla. Varmista, että ortoosi on tukevasti paikallaan estämättä verenkiertoa. Sulje yläkaistat.
HUOM! Jos haluat asettaa ROM, poista kiskot taskuista, avaa kansi ja aseta haluamasi asetus nastojen avulla. Varmista, että molemmissa liitoksissa on sama asetus.

- EN** 1. Open knee wrap.
2. Position wrap with grey on inside and position the hinges slightly above knee.
3. Fasten straps beginning with most distal until they fit comfortably around the knee without inhibiting circulation. Fasten remaining support straps.

NOTE: To set ROM hinge, remove ROM from pocket, open cover and set hinge by placing pins in desired setting. Close cover and reinsert into pocket. Make sure both hinges have identical settings.

- FI** Polven stabilisointiin, posttraumaattisesti ja postoperatiivisesti. Estää hyperextension.
EN Stabilization of knee joint, post trauma and post operation. Restricting hyperextension.

- FI** Käsinpesu max 30 astetta. Tasokuivaus. Sulje tarranauha ja poista kiskot ennen pesua. Älä käytä valkaisu- tai huuhteluainetta, sillä se saattaa heikentää materiaalin toimintaa. Ei silitystä. Ei rumpukuivausta.
EN Hand wash max 30°. Dry flat. Secure all hook and loop closures and remove the hinges before washing. Do not use bleach, chlorine bleach or fabric softener as this could impair the function of the material. Do not dry clean. Do not iron. Do not tumble dry.



INSTRUCTIONS FOR USE

NeoROM 40 cm – STABILIZING KNEE BRACE

art no 70526

Application

- SE** 1. Öppna upp ortosen.
2. Placera ortosen med den grå insidan mot benet och centrera ortosen led strax ovan knäleden.
3. Förslut banden, starta med bandet under knät, se till att ortosen sitter stadigt utan att hindra cirkulationen. Förslut de övre banden.
OBS! För att ställa in ROM, ta ut skenorna ur fickorna, öppna locket och ställ önskad inställning med stiften. Säkerställ att båda lederna har samma inställning.

- DK** 1. Åbn ortosen.
2. Placer ortosen med det grå inde mod benet og centrér skinnerne lige over knæleddet.
3. Luk stropperne, start med stroppen under knæet, sørg for, at ortosen er fast placeret uden at forhindre cirkulation. Luk de øvre bånd.

OBS! For at indstille ROM, fjern skinnerne fra lommerne, åbne omslag og indstille den ønskede indstilling med stifterne. Sørg for at begge samlinger har samme indstilling.

- NO** 1. Åpne ortosen.
2. Sett ortosen med grått innvendig mot benet og sentrer skinnene rett over kneleddet.
3. Lukk stroppene, start med stroppen under kneet, sørg for at ortosen er stødt fast uten å hindre sirkulasjon. Lukk øvre banden.

Indication

- SE** Stabilisering av knäled, posttraumatiskt och postoperativ. Begränsning av hyperextension.
DK Stabilisering af knæled, posttraume og postoperation. Begrænsning af hyperextension.
NO Stabilisering av kneledd, posttraumatisk og postoperativ. Begrensning av hyperekstension.

Washing instructions

- SE** Handtvätt max 30°. Plantorkas. Fäst kardborrbanden och ta ut skenorna vid tvätt. Använd ej blekmedel, klorin eller sköljmedel då detta kan försämra materialets funktion. Ej kemtvätt. Stryk och torktumla ej.
DK Håndvask max 30°. Tørres plant. Fastgør burre båndet og fjern skinnerne inden vask. Brug ikke blegemiddel, klorin eller skyllemiddel, da det kan forringe materialet. Ikke rens. Må ikke stryges eller tørretumbles.
NO Håndvask maks 30°. Tørkes flatt. Fest borrelåsen og ta ut skinnene når du vasker. Ikke bruk blekemiddel, klorin eller tøyrenskemiddel siden dette kan svekke materialets funksjon. Ikke kjemisk rens/ tekstilrens. Skal ikke strykes eller kjøres i tørketrommel.

Material Composition

Latex-Free Neoprene, Polyester, Aluminum, Nylon.

MERK! For å sette ROM, fjern skinnene fra lommene, åpne locket og sett ønsket innstilling med pinnene. Pass på at begge leddene har samme innstilling.

- FI** 1. Avaa ortoosi.
2. Aseta ortoosi jalkaa vasten ja keskiätä kiskot polvinivelen yläpuolelle.
3. Sulje hihnat, aloita hihna polven alla. Varmista, että ortoosi on tukevasti paikallaan estämättä verenkiertoa. Sulje yläkaistat.
HUOM! Jos haluat asettaa ROM, poista kiskot taskuista, avaa kansi ja aseta haluamasi asetus nastojen avulla. Varmista, että molemmissa liitoksissa on sama asetus.

- EN** 1. Open knee wrap.
2. Position wrap with grey on inside and position the hinges slightly above knee.
3. Fasten straps beginning with most distal until they fit comfortably around the knee without inhibiting circulation. Fasten remaining support straps.

NOTE: To set ROM hinge, remove ROM from pocket, open cover and set hinge by placing pins in desired setting. Close cover and reinsert into pocket. Make sure both hinges have identical settings.

- FI** Polven stabilisointiin, posttraumaattisesti ja postoperatiivisesti. Estää hyperextension.
EN Stabilization of knee joint, post trauma and post operation. Restricting hyperextension.

- FI** Käsinpesu max 30 astetta. Tasokuivaus. Sulje tarranauha ja poista kiskot ennen pesua. Älä käytä valkaisu- tai huuhteluainetta, sillä se saattaa heikentää materiaalin toimintaa. Ei silitystä. Ei rumpukuivausta.
EN Hand wash max 30°. Dry flat. Secure all hook and loop closures and remove the hinges before washing. Do not use bleach, chlorine bleach or fabric softener as this could impair the function of the material. Do not dry clean. Do not iron. Do not tumble dry.

