

# TopScore ROM - Post-op knæortose

Postoperativ knæortose anvendes som en stabiliserende eller immobiliserende ortose efter skade eller operation af knæleddet til kontrol af fleksion/ekstension og medial/lateral stabilitet. Udviklet for hurtigt og nem afprøvning efter skade/operation.

Indersiden af ortosen er forsynet med blød polstring, som med god friktion griber fat om benet og får ortosen til at sidde på plads. De skråtstillede stropper med hurtiglåse gør afprøvningen og anlæggelse let for patienten. Skinnerne kan indstilles, så de tilpasses individuelt til hver patient.

Med den teleskopiske mekanisme kan ortosens længde justeres fra 50 cm til 63 cm. Forlængelse og bøjning kan justeres og låses fra 0° til 45° i intervaller på 10°/15°. Kontrolleret bevægelsesområde mellem 0° og 120° bestemmes let med en trykknop i intervaller på 10°/15°. Indstillingen kan sikres med de medfølgende kabelbindere.

**Indikationer:** Postoperativ stabilisering. Posttraumatisk stabilisering. Til kontrol af bevægelsesområdet efter operation af ACL, PCL, MCL og LCC, menisk, patella, slidgigt, stabil femoral kondylfraktur, total knæudskiftning og tibial kondylfraktur.

BEMÆRK! Må kun bruges af sundhedsfaglig uddannet personale og lægefaglig anbefaling .

**Størrelse:** Universal størrelse.

**Materiale:** Aluminium, Skum, Velcro. Latexfri.

**Vaskeanvisning:** Tekstilbetræk - Maskinvaskes ved 30 °C. Det anbefales, at håndvaske dette, dermed opnåes størst holdbarhed. Skinnerne og led - vaskes af med klud og varmt vand/mild desinfektionsmiddel.


Størrelse	Art.no
Universal	70645-00-50
Tilbehør	Art.no
Polstring	70645-00-55
Bånd	70645-00-65



Med teleskopmekanismen kan ortosens længde justeres fra 50 cm til 63 cm.



Forlængelse og bøjning kan justeres og låses fra 0° til 45° i intervaller på 10°/15°. Kontrolleret bevægelsesområde mellem 0° og 120° bestemmes let med en trykknop i intervaller på 10°/15°.

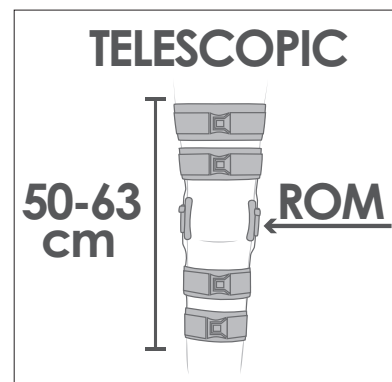

MD Class I CE