

# Stride Duo - OA Knæortose

ART.NO 70656

Stride Duo har dobbelte skinner for øget stabilitet til knæet. Anvendes til smertelindring og til at lette og forbedre funktionen ved knæartrose. Ortosen har den unikke egenskab, at kunne vinkle skinnen ved hjælp af den medfølgende nøgle og kan indstilles til medial eller lateral aflastning. ROM/range of motion kan ved ekstension indstilles i graderne 0°, 5°, 10°, 15°, 20° & 25° og ved fleksion i graderne 45°, 60°, 75° & 90°. Den forreste skinnebåndsmanschetter giver mulighed for nem påføring samt fjernelse og er buet for at sidde komfortabelt over skinnebenet. De fleksible stropper i lårmanchetteren er let foret for god komfort, tilpasser sig til lårets form og kontur gennem hele bevægelsen.



**Indikationer:** Mild til svær medial eller lateral knæartrose med ligamentøs ustabilitet. Funktionel støtte til reduceret medial eller lateral ledbelastning.

**Kontraindikationer:** Ikke beregnet til personer med vægt >110 kg.

**Størrelse:** S-2XL. Fås til højre og venstre knæ.

**Materiale:** : 38% Aluminium/Polymer resin, 32% Nylon, 10% EVA Foam/Doeskin, 6% Stainless steel, 5% Polypropylene, 3% Delrin, 3% Neopren, 3% Polyester. Latex free.

**Vaskeanvisning:** Skyl ortosen og lad lufttørre. Polstring og urenheder kan fjernes ved håndvask hvis nødvendigt, skal lufttørres. Sørg for at velcrostropperne er frie for snavs så vedhæftningsevnen ikke forringes.


**Tilbehør\*:** Ekstra polstring & bånd kan købes adskilt.

- Polstring til Stride Duo, venstre (S-2XL) art.no 70656-10-XX
- Polstring til Stride Duo, højre (S-2XL) art.no 70656-20-XX
- Bånd sæt til Stride Duo (S-2XL) art.no 70656-30-XX



MD Class I CE

Størrelse	1. Omkreds lår cm	2. Omkreds midt-patella cm	3. Omkreds skinneben cm	Art.no Venstre	Art.no Højre
S	39,5-47	28-33	31-35	70656-10-40	70656-20-40
M	47-53,5	33-37	33,5-38	70656-10-50	70656-20-50
L	53,5-59,5	37-40,5	36-40	70656-10-60	70656-20-60
XL	59,5-63,5	40,5-45	38-43	70656-10-70	70656-20-70
2XL	63,5-71	45-49	43-48	70656-10-80	70656-20-80

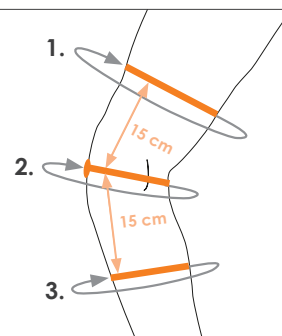

\*Bestillingvare