

Cirrus - Airwalker

ART.NO 80215

Cirrus er en individuelt tilpasset airwalker, der giver maksimal støtte og komfort. Pumpesystemet er fuldt integreret, så kompression og pasform kan justeres uden en separat pumpe. Walkeren har en pumpe på hver side med uafhængig betjening. Skinnen er nem at justere med tre velcrobånd. Både skinne og polstringen er ventileret og anatomisk udformet. Rullesål med lav profil giver god stabilitet og gør det lettere at gå normalt. Lav vægt.

Som tilbehør er der en hælkle, hvis der ønskes øget plantarfleksion. Fem uafhængige kiler sættes sammen til den ønskede højde.

Indikationer: Immobilisering af fod og ankel. Til behandling af blødtvævsskader, forstuvninger, stabile frakturer og akillesseneruptur. Også til postoperativ stabilisering af anklen. **Kontraindikationer:** Ikke beregnet til diabetespatienter. Ikke beregnet til ustabil brud.

Risici: Ingen kendte.

Materiale: Polypropylen 62%, Termoplastisk gummi (TPR) 5%, Nylon 11%, PU-skum 8%, TPU 6%, EVA 3%, Metal 3%, Papirmasse 2%. Latexfri.


Vaskeråd: Yderdelen rengøres med en fugtig klud. Polstring håndvaskes og lufttørres. Må ikke tørretumbles.

Opmåling: Modsvarende kostørrelse. Størrelse XS og S, maksimal vægt 90 kg. Størrelse M, L og XL maksimal vægt 135 kg.


Tilbehør:

- Hælkil venstre(Universal): 80215-10-00
- Hælkil højre(Universal): 80215-20-00
- Strømper i 2-pak (Universal): 80215-30-00
- Hygiejnebeskyttelse 10-pak (Universal): 80219-00-00

Størrelse	Skostørrelse	Art.no
X Small	<35	80215-00-30
Small	36-38	80215-00-40
Medium	39-42	80215-00-50
Large	43-45	80215-00-60
X Large	>46	80215-00-70

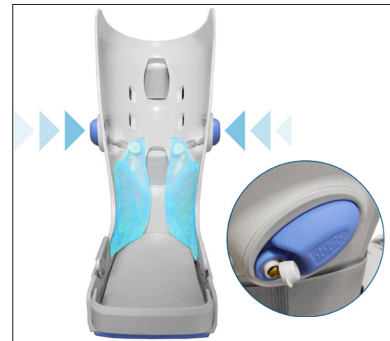

Integrerede pumper på begge sider giver selvstændig regulering af kompressionen.

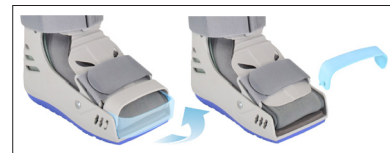

Aftagelig og justerbar tåbeskyttelse.



Lav rullesål til naturlig gangart.



De cirkulære bånd kan trådes gennem yderdelen for at opnå maksimal komprimering.



MD Class I CE