

e-STAB 3-punkts korset




NordicCare[®]

NORDICARE ORTOPEDI + REHAB AB • Solrosvägen 1 • SE-263 62 Viken, Sverige
Tel: +46 42-35 22 20 • Fax: +46 42-35 22 21 • info@nordicare.se • www.nordicare.se/dk

e-STAB 3-punkts korset

Nem at tilpasse

- Begrænser fleksion og sidelæns bevægelse i den thoracolumbale del af rygsøjlen (Th10 - L1 / L2). Bruges til fraktur, hvirvelkompression, osteoporose, dislokation og artrose.
- Justerbar i bredde og højde. One size. Passer til mange forskellige kropstyper.
- Nem justering da skrueene ikke skal fjernes, kun løsnes.
- Teleskopisk og formbar hoftebøjle, der kan låses i forskellige vinkler.
- Vinklen på brystbøjlen kan justeres i trin a 7,5 grader.




Højde og bredde justeres nemt med en skrue-trækker. Aftagelig og anatomisk bagplade.




Længden på bæltet justeres nemt med et spænde og velcrolukning.



Polstringen er aftagelig og vand-afvisende, hvilket betyder, at den kan have på ved bad.

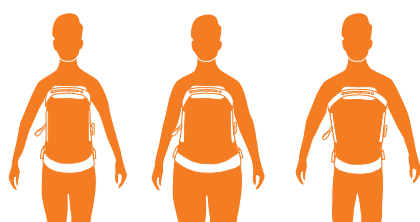

Fits all body types

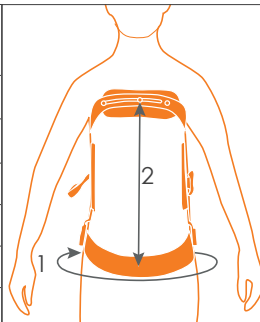Størrelse	Hoffemål i cm (1)	Højde i cm (2)	Art.no	
1	50-75	41-54	50375-00-40	
1 Short		30-41	50375-50-40	
2	75-105	41-54	50375-00-50	
2 Short		30-41	50375-50-50	
3	105-135	41-54	50375-00-60	
3 Short		30-41	50375-50-60	