



NordiCare[®] +

Contender[™] Albueortose

Contender™ Albueortose

Cliklås

Skinnen kan let tages af og på med den ene hånd og kompressionen kan fin justeres.

Teleskop mekanisme

Nem justering af ortosens længde på 35-50 cm, uden værktøj.

Aftagelig bicepsmanschett

Muliggør større fleksion for personer med markante biceps/kraftige overarme.

Quick release og låsning af positioner

11 låse positioner for hurtig og simpelthen låsen i den ønskede position mellem -10° til 90° .



Formpresset polstring

Aftagelig polstring med luftkanaler som giver en svalende fornemmelse.



Justering af bevægelsesintrevælet

Sikker og nem justering af bevægelsesområdet fra -10° til 110° . Unik låsefunktion som sikrer indstillingen med låsegummibånd.



- Er stabil
- Let at anvende
- Mange indstillingsmuligheder



Formet manchett

Formen af underarmsmanchett muliggør fuld fleksion af albueledet.

Klipbare bånd

Enkel justering af længden på båndet.

Teleskop skinne

Nem justering af længde samt placering af manchett. Justeringsområde 3 cm til individuel tilpasning.




Aluminiums skinde

Letvægts aluminium med bøjnings markering hvilket giver en let tilpasning til patienten.



Formbare manchetter

Formbare bløde aluminiums manchetter der let kan tilpasses armen, både ved smalle og kraftige arme.

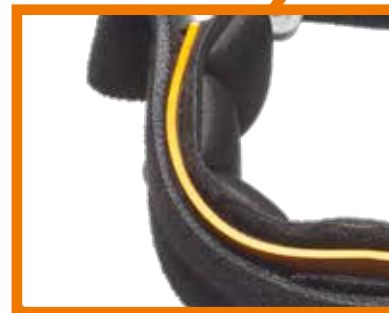

Behagelig aflastning

Den formede manchett mindsker risikoen for tryk på ulna.



Håndstykke (valgfrít)

Positioner og fikserer håndledet i den neutrale stilling for at undgå pro- og supination.

Contender™ Albueortose

ART.NO 20203

Contender Albueortose bruges postoperativt eller ved posttraumatisk stabilisering af arm og albue til at give kontrolleret bevægelse eller immobilisering. Teleskop mekanisme for nem justering af længde. Aluminium-manchetterne omkring toppen og underarmen kan formes individuelt, så risikoen for skred falder.

Manchetterne som mødes i biceps/ved albueleddet kan fjernes, hvilket betyder, at ortosen også kan tilpasses folk med markante biceps/store overarme og tillade større fleksion uden at støde på. Skinnen kan let tages af og på med den ene hånd med kliklåsene.

Polstringen er blød og aflastende.

Extension og fleksion kan justeres og fastgøres fra -10 °- 90 °. Indstillingen foregår i intervaller på 10 °. Styret bevægelse fra -10 ° - 110 °. Indstillingen er sikret med en låse-elastik.

Indikationer:

Bruges til postoperativ eller posttraumatisk stabilisering. Muskel/ledbåndsskader. Den distale humerus. Albueplastik. Stabil albuefraktur.

Størrelse:

Universal. Fås til højre og venstre arm. Ortose længde 35-50cm, passer overarms omkreds op til 56 cm, underarm på op til 46 cm.

Materialer:

Skinde: Letvægts aluminium.
Manchetter: aluminium og nylon.
Polstring: Polyethylen og nylon.

Vask:

Aluminiumskinnen aftørres med en fugtig klud.
Polstring hånd vaskes i koldt vand, tørres fladt, brug ikke blegemiddel.

Ekstra tilbehør:

Ekstra tilbehør omfatter et komfortabel håndstykke for aflastning, positionere og fikserer håndleddet i neutral position for at undgå pro- og supination. Hånddelen er udformet som en håndledsortose, der blødt omsluttender hånd og håndled. Fixseringen er meget god og gør at uønsket muskelaktivitet rundt albueleddet reduceres. Hånddelen giver yderligere stabilisering af hele ortosen, og sikre at den sidder ekstra fast uden at glide eller rotere.



Håndstykke (valgtrit).



Produkt	Sida	Art.no
Contender Albueortose	Venstre	20203-10-50
Contender Albueortose	Højre	20203-20-50
Håndstykke	Venstre	20203-15-50
Håndstykke	Højre	20203-25-50

**NordiCare®**